

## カムログ / コーンログ システム関連商品

### ボーンプロファイラー / ボーンプロファイラーピン


アバットメントやジンジバフォーマー装着時に不要なフィクスチャ周囲骨を形成します。フィクスチャの種類と直径に応じたボーンプロファイラーピンをフィクスチャに挿入し、ヘックススクリウドライバーを用いて固定します。ボーンプロファイラーピンにボーンプロファイラーを挿入し、回転させてフィクスチャ周囲骨を形成します。



+



or

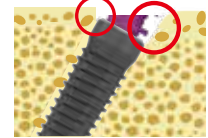

ボーンプロファイラー

	商品コード	推奨回転数
3.3mm 用	J5003.3350	400 rpm
3.8mm 用	J5003.4360	350 rpm
4.3mm 用		
5.0mm 用	J5003.5070	300 rpm

標準価格 ¥18,000 (税別)

カムログ  
ボーンプロファイラーピン

	商品コード
3.3mm 用	J5002.3300
3.8mm 用	J5002.3800
4.3mm 用	J5002.4300
5.0mm 用	J5002.5000

標準価格 ¥3,000 (税別)

コーンログ  
ボーンプロファイラーピン

	商品コード
3.3mm 用	C5002.3300
3.8mm 用	C5002.3800
4.3mm 用	C5002.4300
5.0mm 用	C5002.5000

標準価格 ¥3,000 (税別)

### カウンターシンク

埋入窩形成の際、周囲骨を平らにするドリルです。埋入窩形成時、パイロットドリルで穿孔した後にカウンターシンクの先端部を骨孔に挿入し、ドリリングを行い骨頂を形成します。



	商品コード	推奨回転数
3.3mm 用	J5006.3346	400 rpm
3.8mm 用	J5006.3852	350 rpm
4.3mm 用	J5006.4356	350 rpm
5.0mm 用	J5006.5063	300 rpm

標準価格 ¥17,000 (税別)



### ベアリングドリル

カバースクリュー上に被さった骨組織を取り除くために使用します。

ベアリングドリル先端の突起(ガイドピン)部分をカバースクリューの六角形の孔に挿入し、ドリリングを行い骨組織を取り除きます。



	商品コード	推奨回転数
3.3mm 用	J5004.3300	50 rpm
3.8mm 用	J5004.3800	
4.3mm 用	J5004.4300	
5.0mm 用	J5004.5000	

標準価格 ¥17,000 (税別)



カムログボーンプロファイラー 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000152