

カムログ/コーンログ プログレッシブラインインプラント

カムログ/コーンログ プログレッシブラインインプラントは、
高い初期安定性を必要とする修復に適したアグレッシブな形状のインプラントです。

- アバットメント連結部は従来のカムログ/コーンログ システムと同一です。
- ネック部付近のスレッドは、上顎洞底までの距離が制限されている場合でも、高い保持力を提供します。
- パラレルウォール部分により垂直位置の決定が柔軟に行えます。
- 解剖学的形状のコニカルエリアは一次安定性を高めると共に、骨の少ない領域で優位性があります。
- 安定のプロモート表面性状。

CAMLOG® PROGRESSIVE-LINE

カムログ インプラントシステム

- 0.4mmの機械研磨されたインプラントのネック領域。
- 対称的に配置された3つのグループを備えたチューブインチューブ連結。
- プラットフォームスイッチングがオプションとして選択可能。



CONOLOG® PROGRESSIVE-LINE

コーンログ インプラントシステム

- コーンログインプラントの内部連結は7.5°のテーパで、応力やトルクの分散。
- あらかじめ付与されたプラットフォームスイッチング。
- アバットメントの正確なポジショニングのため、3つのグループを付与。
- アバットメント側の3つのカムがインプラントの3つのグループに嵌合することで正確な位置で確実に連結されたことを確認可能。



カムログインプラント プログレッシブライン 標準価格 32,000円(税別)

スナップマウントとスクリーマウント

	商品コード		Ø	L	A Ø
	スクリーマウント	スナップマウント			
	K1075.3311	K1076.3311	3.3 mm	11 mm	2.2mm
	K1075.3313	K1076.3313		13 mm	
	K1075.3316	K1076.3316		16 mm	
	K1075.3809	K1076.3809	3.8 mm	9 mm	3.0mm
	K1075.3811	K1076.3811		11 mm	
	K1075.3813	K1076.3813		13 mm	
	K1075.3816	K1076.3816	4.3 mm	16 mm	2.7mm
	K1075.4309	K1076.4309		9 mm	
	K1075.4311	K1076.4311		11 mm	
	K1075.4313	K1076.4313	5.0 mm	13 mm	2.7mm
	K1075.4316	K1076.4316		16 mm	
	K1075.5009	K1076.5009		9 mm	
	K1075.5011	K1076.5011	5.0 mm	11 mm	3.5mm
	K1075.5013	K1076.5013		13 mm	
	K1075.5016	K1076.5016		16mm	



プログレッシブラインには、カムログ/コーンログいずれにもスナップマウントとスクリーマウントとがございます。

コーンログインプラント プログレッシブライン 標準価格 32,000円(税別)


プログレッシブライン 外科セット

	商品コード		Ø	L	A Ø
	スクリーマウント	スナップマウント			
	C1085.3309	C1086.3309	3.3 mm	9 mm	2.2mm
	C1085.3311	C1086.3311		11 mm	
	C1085.3313	C1086.3313		13 mm	
	C1085.3316	C1086.3316		16 mm	
	C1085.3807	C1086.3807	3.8 mm	7 mm	3.0mm
	C1085.3809	C1086.3809		9 mm	
	C1085.3811	C1086.3811		11 mm	
	C1085.3813	C1086.3813		13 mm	
	C1085.3816	C1086.3816	4.3 mm	16 mm	2.7mm
	C1085.4307	C1086.4307		7 mm	
	C1085.4309	C1086.4309		9 mm	
	C1085.4311	C1086.4311		11 mm	
	C1085.4313	C1086.4313	5.0 mm	13 mm	2.7mm
	C1085.4316	C1086.4316		16 mm	
	C1085.5007	C1086.5007		7 mm	
	C1085.5009	C1086.5009		9 mm	
	C1085.5011	C1086.5011	5.0 mm	11 mm	3.5mm
	C1085.5013	C1086.5013		13 mm	
	C1085.5016	C1086.5016		16 mm	



Hexスクレイドライバーや埋入ツールなどは、カムログ/コーンログ スクリューライン用外科セットと共通です。

Saw Bone 15 Specimen (Class 3-4)
Drilling Sequence Pilot Drill > Form Drill

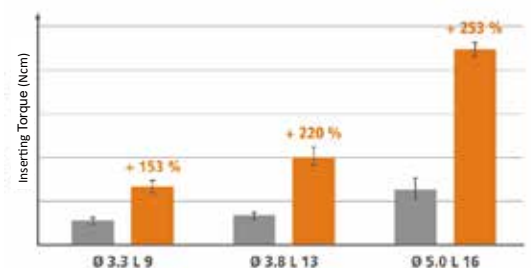


Source: Internal Data

■ SCREW-LINE
■ PROGRESSIVE-LINE

デンスボーンドリル

スレッドカッター

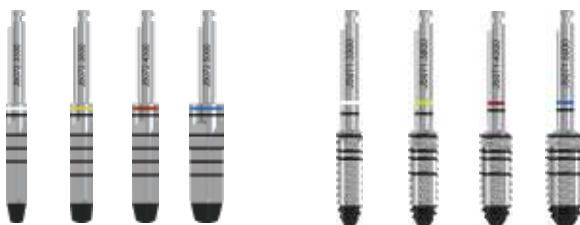

硬い骨質へのドリリングに追加して使用します。

CAMLOG PROGRESSIVE-LINE Animation
こちらからご覧になれます。↓↓↓



カムログインプラント プログレッシブライン 医療機器承認番号【高度】30100BZX00215000
 コーンログインプラント プログレッシブライン 医療機器承認番号【高度】30100BZX00204000
 インプラントドリル プログレッシブライン 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000161
 外科セット プログレッシブライン 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000162

おかげさまで **20th Anniversary**
ALCADENT
 株式会社 **アルタデント**

本 社 / 〒530-0012 大阪市北区芝田 2-8-31 第三東洋ビル 2F
 東京支社 / 〒106-0047 東京都港区南麻布 2-14-19 オキノビル 3F
 e-mail / info@alta-dent.com http://alta-dent.com

TEL 06-6377-2221 FAX 06-6377-2223
 TEL 03-5420-2290 FAX 03-5420-4790