




カムログ/コーンログ
チタンベースアバットメントフリー


カムログ チタンベースアバットメントフリー

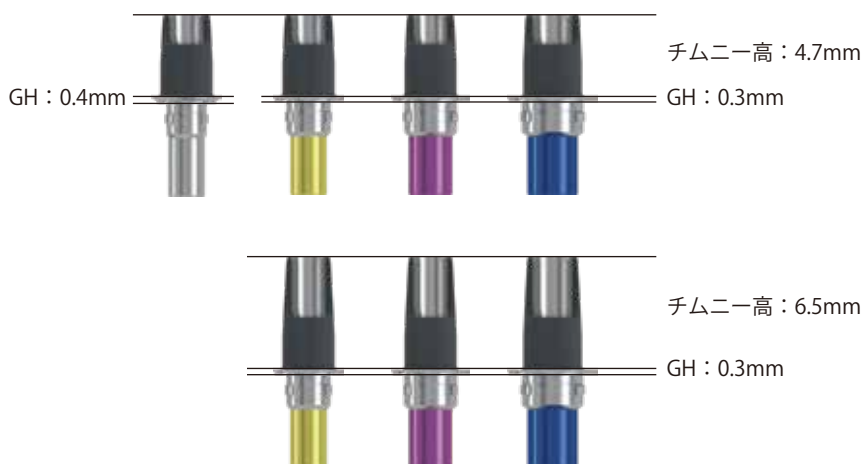

商品コード	Ø	GH
K2247.3348*	3.3mm 用	0.4mm
K2247.3848	3.8mm 用	0.3mm
K2247.4348	4.3mm 用	
K2247.5048	5.0mm 用	
K2265.3848	3.8mm 用	0.3mm
K2265.4348	4.3mm 用	
K2265.5048	5.0mm 用	

標準価格 15,000円 (税別)


カムログ チタンベースアバットメントフリー PS

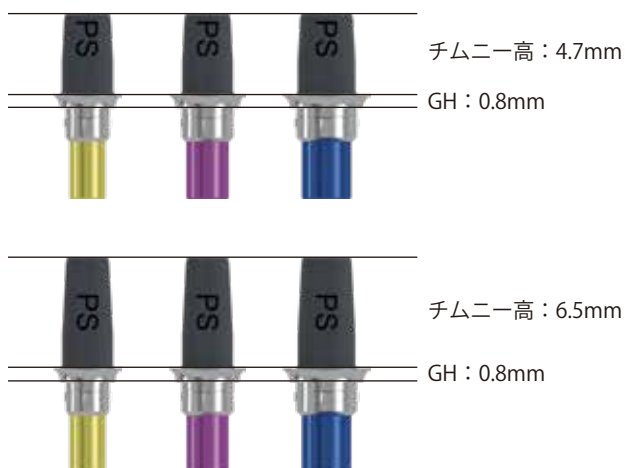

商品コード	Ø	GH
K2247.3808	3.8mm 用	0.8mm
K2247.4308	4.3mm 用	
K2247.5008	5.0mm 用	
K2265.3808	3.8mm 用	0.8mm
K2265.4308	4.3mm 用	
K2265.5008	5.0mm 用	

標準価格 15,000円 (税別)

ボールポイントスクレュードライバー

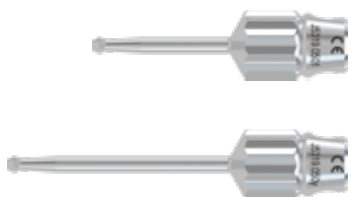


商品コード	商品名	L
J5319.0501	手用 / ラチェット用 ショート	24mm
J5319.0502	手用 / ラチェット用 ロング	32mm

標準価格 7,100円 (税別)

* Ø3.3mmは、上顎側切歯、下顎側切歯/中切歯 領域の歯冠修復にのみ使用してください。


CONELOG[®] SYSTEM

コーンログ チタンベースアバットメントフリー

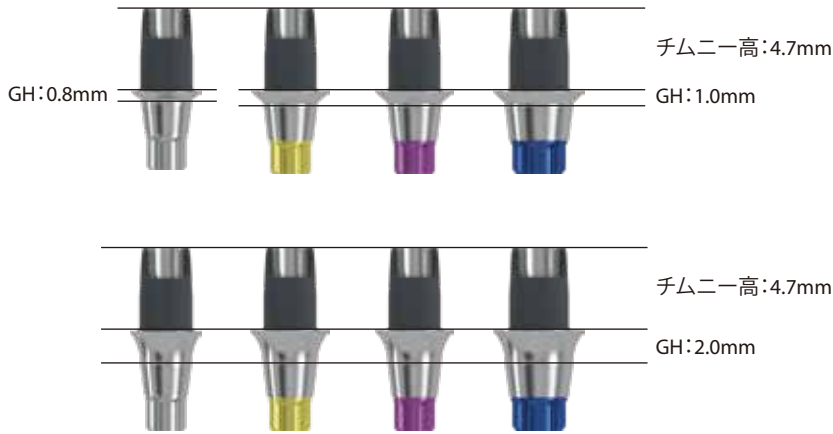

商品コード	φ	GH
C2247.3308*	3.3mm 用	0.8mm
C2247.3808	3.8mm 用	1.0mm
C2247.4308	4.3mm 用	
C2247.5008	5.0mm 用	
C2247.3320*	3.3mm 用	
C2247.3820	3.8mm 用	
C2247.4320	4.3mm 用	
C2247.5020	5.0mm 用	

標準価格 15,000円 (税別)

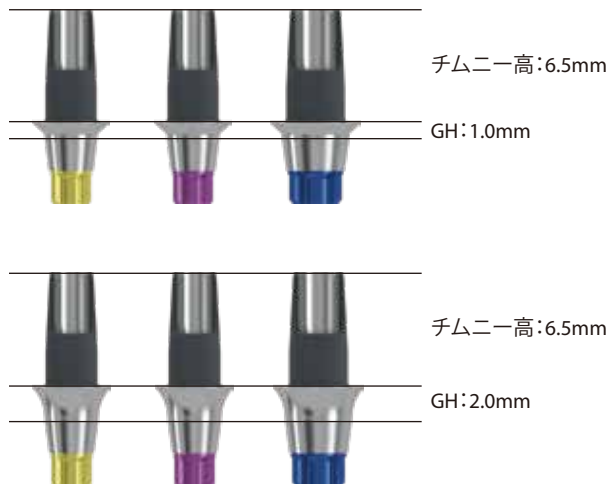

商品コード	φ	GH
C2265.3808	3.8mm 用	1.0mm
C2265.4308	4.3mm 用	
C2265.5008	5.0mm 用	
C2265.3820	3.8mm 用	2.0mm
C2265.4320	4.3mm 用	
C2265.5020	5.0mm 用	

標準価格 15,000円 (税別)

技工操作手順



チタンベースをラボアナログにセットし、ラボスクリューで締めます。



クラウンを作製し、仕上げます。(接着しないでください!)



ラボスクリューをアバットメントスクリューに交換し、スクリューチャンネルを閉じて接着材が流れ込まないように保護し、クラウンを接着します。



接着されたクラウンをチタンベースとキャプチャードアバットメントスクリュー**とともにインプラントに取り付けます。(最大トルク = 20 Ncm)

**「キャプチャードアバットメントスクリュー」：アバットメント内でスクリューを確実に位置決めし、スクリューがアバットメントから外れることなく保持され、安定して固定されます。

カムログ/コーンログ チタンベースアバットメントフリー

効率的なデジタルワークフロー

スキャンボディを使用した口腔内スキャンングにより、カスタムメイドのアバットメント/メゾストラクチャーやクラウンの製作まで、CAD/CAMを使用したフルデジタル修復物の作製が可能です。

チタンベースアバットメントフリー 角度付きスクリーチャンネルの柔軟なソリューション

- 2種類のチムニー高：4.7mm / 6.5mm
- 2種類の歯肉高：1.0mm / 2.0mm（コーンログに限る）
- 接着面のサンドブラスト加工済
- ラボスクリーがパッケージに同梱
- 回転防止機構の付与
- 前歯部の審美性が向上（スクリーチャンネルへの口蓋側アクセスが可能）
- スペースが限られている場合にスクリー・チャンネルへのアクセスが容易
- 垂直方向に最大25°、水平方向に最大35°の軸補正が可能（歯肉高さ2mmの場合、垂直方向15°まで）



注) 角度付きスクリーチャンネルで使用する場合、最終的な固定に使用するアバットメントスクリーが接着前に挿入されていることを確認してください。

ストレートで使用する場合

HEXスクリュードライバー 0.05インチを使用してください。
J5317.0501/0502/0503/0504/0510



アングルで使用する場合

ボールポイント スクリュードライバーを使用してください。
J5319.0501/0502



カムログアバットメント K-シリーズ 医療機器承認番号【高度】 30200BZX00071000
コーンログアバットメント 医療機器承認番号【高度】 30600BZX00146000
HEXスクリュードライバー 0.05インチ 医療機器届出番号【一般】 27B1X00027000127

製造販売業者 株式会社アルタデント

本 社 〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-31 第三東洋ビル2F TEL 06-6377-2221 FAX 06-6377-2223
東京支社 〒106-0047 東京都港区南麻布2-14-19 オキノビル3F TEL 03-5420-2290 FAX 03-5420-4790

製造業者 ALTATEC GmbH Maybachstr 5, 71229 Wimsheim, Germany

FL.0327.202501.01

camlog
ALFADENT
株式会社 アルタデント
www.alta-dent.com