


ボーンタックは、タック針部にスクリューが付与されており、骨内で強固に固定されます。マレットで骨に挿入しますが、撤去時にはヘックススクリウドライバーで緩めてヘッド部を浮き上がらせます。

ボーンタック	全長	ヘッド直径
商品コード 021-00003	3.0 mm	2.5 mm
商品コード 021-00005	5.0 mm	2.5 mm

※ 5.0mmは青色です。

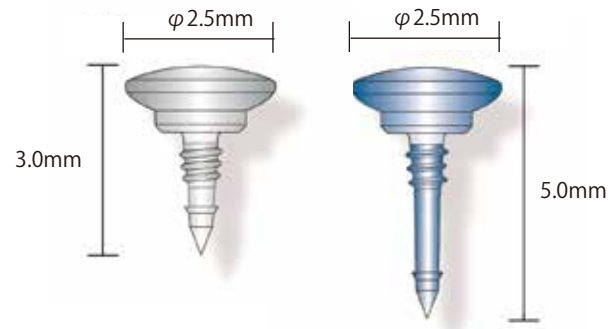

標準価格: 各22,500円 / 10入

エクスターナル ヘックスドライバー 0.9×26mm

商品コード 020-26012 ボーンタック除去用ドライバー 標準価格: 12,000円



ボーンタックの撤去時には、エクスターナルヘックスドライバー0.9×26mmをボーンタック頭部の内部六角に挿入し、反時計回りに回転させます。スクリュー部が緩んだら、ヘッド部を引っ張り除去します。必要に応じてピンセットや止血鉗子を使用します。

ツイストドリル#1CA φ0.45/27mmL

商品コード 020-29020 硬骨質症例でのボーンタック設置前の起始点形成に 標準価格: 7,800円



ボーンタック プレースメントインスツルメント

商品コード 042-00002 直タイプの設置用インスツルメント 標準価格: 24,000円



SALVIN
Dental Specialties

ボーンタック プレースメントインスツルメント・曲

商品コード 042-00001 曲タイプの設置用インスツルメント 標準価格: 30,000円



ボーンタック マレット

商品コード 040-90001 標準価格: 13,500円

全長185mm
槌打部直径21mm
重量145g



※ 価格はすべて税抜きです。

チタン薄膜プレート
ボーンタックプレースメントインスツルメント
Salvinサージカルマレット

医療機器承認番号【高度】21100BZY00574000
医療機器届出番号【一般】13B1X00053P00028
医療機器届出番号【一般】13B1X00053P00031